



Sistema  
Pull & Click

## NUOVO SISTEMA DI FORATURA


Sicuro e Igienico

Nickel Tested

Acciaio Inossidabile 316L

Pierce Up Your Look!


**LOVLYLOBY**  
Medical Professional  
Piercing System



Tecnologia Pull & Click

## Mercato Globale Foratura Lobo

Crescita annua stimata +7,5%

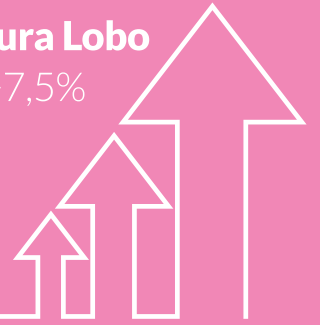


2021-2028

Fonte: Grand View Research

## Sistema di Foratura Delicato e Preciso



- ◆ Codice Modello Riportato su Expo Banco
- ◆ Codice a Barre Singolo Orecchino
- ◆ Data Confezionamento e Numero Lotto

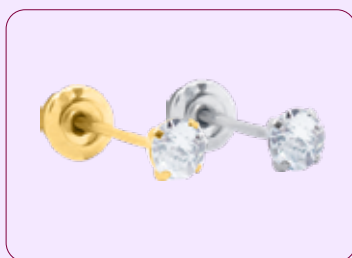

- ◆ NICKEL TESTED
- ◆ Materiale di Grado Medico (Acciaio Inossidabile 316L)
- ◆ Conforme agli Standard Europei EN1811, alle normative Reach e Certificato da SGS Germania
- ◆ Confezionamento Sterile Monouso
- ◆ Utilizzo a 360 Gradi
- ◆ Ago Ultra Sottile ( $\pm 0.73$  mm)
- ◆ Sistema di Chiusura a "Campana"

### SISTEMA INNOVATIVO

- ◆ **Pop-up System:** espelle la capsula di protezione dell'orecchino, evitando che si incastri e provochi fastidi.

# Strumento LOVLYLOBY con Tecnologia Pull & Click




## LE TECNICHE TRADIZIONALI:

Nei metodi tradizionali, la forza viene applicata dal retro della pistola per forare l'orecchio, spingendo rapidamente l'ago nel lobo.

## LA NOSTRA TECNOLOGIA PULL & CLICK:

Il punto chiave della Tecnologia Pull & Click è che consente di avvicinare il dispositivo di foratura al lobo dell'orecchio, mirare con precisione il punto da forare e poi premere facilmente il grilletto. Questa tecnologia fornisce la giusta quantità di forza per perforare il lobo senza causare dolore, garantendo al contempo una foratura precisa.

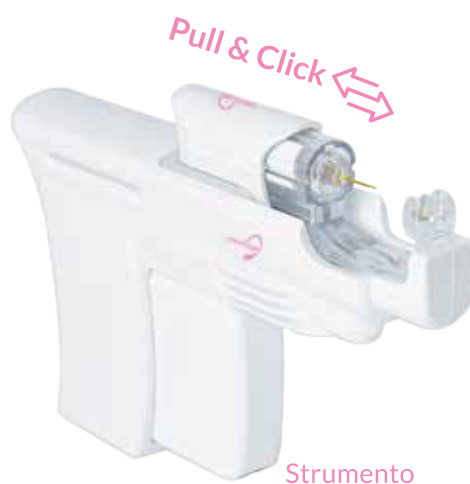

# Utilizzo dello Strumento LOVLYLOBY




1

Pulire sia il davanti che il retro delle orecchie, concentrando l'attenzione soprattutto sulla zona dove verrà eseguita la foratura.




2

Segnare il punto esatto per la foratura usando l'apposito pennarello in dotazione LOVLYLOBY.

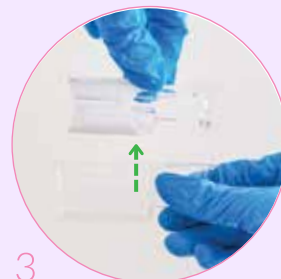

3

Per rimuovere la cartuccia, afferrala con due dita dal centro, NON dalle estremità.

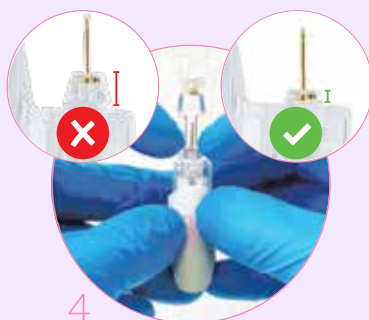

4

Verifica che il supporto del perno sia completamente inserito all'interno della cartuccia.



5

Assicurati che l'ago sia correttamente posizionato. (importante vedere foto)



6

Inserisci la cartuccia nell'apposito alloggiamento dal retro. Premi delicatamente per assicurarti che la cartuccia sia ben posizionata sullo strumento.

(importante vedere foto)




7

Tendi delicatamente l'orecchio verso l'esterno. Mantenere lo strumento parallelo al viso.

**Essenziale per la riuscita della foratura è posizionare la parte terminale della cartuccia (dove alloggia la campanella) appoggiata al retro del lobo del cliente.**

(importante vedere foto)

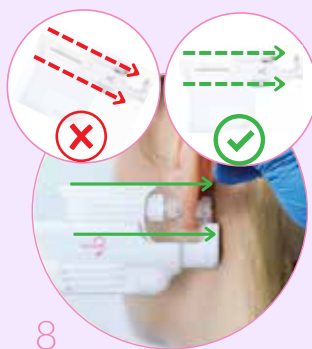

8

Allinearsi al segno sull'orecchio. **Importante tenere il dispositivo ad un'angolazione di 90°.**

Premere il dispositivo fino in fondo per **2 secondi** e rilasciare.



9

**I 2 secondi** sono fondamentali per l'attivazione del **POP-UP System**, meccanismo di sicurezza che espelle la capsula di protezione dell'orecchino, evitando che si incastri e provochi fastidi al cliente.



10

Dopo la foratura, rimuovere delicatamente il dispositivo dall'orecchio procedendo verso il basso.

# STARTER KIT include:



- ◆ 78 Piercing (26 modelli X 3)
- ◆ Pistola
- ◆ Pennarello
- ◆ Mollette capelli
- ◆ Specchio
- ◆ Display
- ◆ Vetrofania
- ◆ Modulo consenso informato
- ◆ Attestato coraggio per bambini
- ◆ Orecchio di prova per forare
- ◆ Kit Demo



Scarica il Modulo di Consenso dal nostro sito web: [www.lovlyloby.it/documenti](http://www.lovlyloby.it/documenti)

Cosa c'è nella scatola:  
6x Cartuccia monouso (3 coppie)  
6x Alcohol Pads



# ADULTI TEENAGERS



A1..... Pallina Acciaio  
3 mm..... Col. Argento



A2..... Pallina Acciaio  
3 mm..... Col. Oro




A3..... Pallina Acciaio  
4 mm..... Col. Argento




A4..... Pallina Acciaio  
4 mm..... Col. Oro



Ax5.. Punto Luce Cubico  
4 mm..... Col. Argento

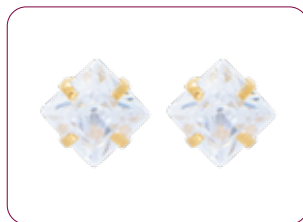

Ax6.. Punto Luce Cubico  
4 mm..... Col. Oro

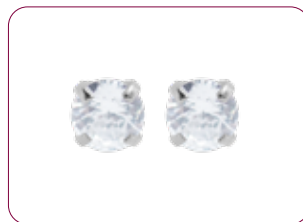

A7..... Punto Luce  
3 mm..... Col. Argento



A8..... Punto Luce  
4 mm..... Col. Argento



A9..... Perla Regolare  
..... Col. Oro



A10.... Cuore Zircono  
..... Col. Argento



A11.. Punto Luce Stella  
4 mm..... Col. Argento

## NASO



N11..... Pallina Acciaio  
per Naso... Col. Argento




N12..... Punto Luce  
per Naso... Col. Argento


# SPECIALE BAMBINI



B13.....Cupcake  
Smaltati.....Col. Oro

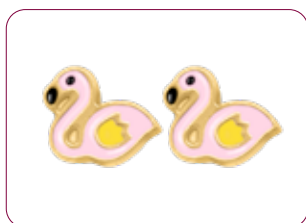

B14.....Fenicottero  
Smaltati.....Col. Oro

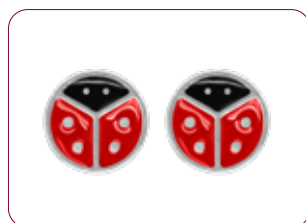


B15.....Coccinella  
Smaltati....Col. Argento




B16.....Coniglietto  
Smaltati.....Col. Oro




B17.....Panda  
Smaltati.....Col. Oro

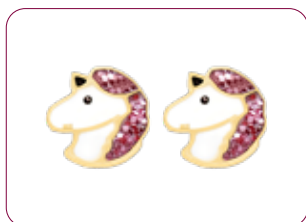

B18.....Unicorno  
Smaltati.....Strass

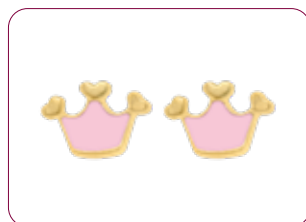

B19.....Corona  
Smaltati.....Col. Oro

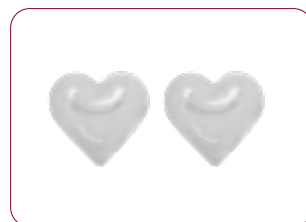

B20.....Cuore Acciaio  
.....Col. Argento




B22.....Margherita  
Smaltati.....Bianco



B23.....Margherita  
Smaltati.....Rosa



B24.....Margherita  
Smaltati.....Azzurro

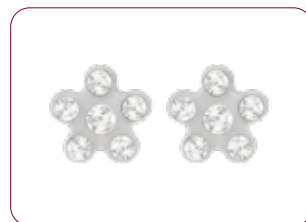

B25.....Margherita  
Strass.....Col. Argento



B26.....Margherita  
Strass Rosa-Col. Argento

# CERTIFICATI SGS



**Test Report**

No. 6905682

Date: 04.06.2024

**INSTITUT  
FRESENIUS**



The following sample(s) was (were) submitted and identified by the client as:

Original Sample ID	Sample Description	Sample Receipt Date
240454601	MEDICAL EAR STUDS SUS316L MEDICAL GRADE STAINLESS STEEL	08/05/2024

SGS Customer No : 10190077  
SGS Order No : 6997412  
Buyer : -  
Order No. : - dt: 08/05/2024  
Country of Origin : -  
Test Performing Period : 22/05/2024 – 03/06/2024  
Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant  
Overall Conclusion : **PASS**  
Test Results : Please refer to the next pages

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**  
This test report was electronically created and released:

	date	name	function	department
created	04.06.2024	i.A. Sabrina Schauß	Project Assistant	Connectivity & Products
released	04.06.2024	i.V. Catherine Bouleau	Group Leader Administration Softlines	Connectivity & Products

Seite page 1 / 6

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Masel 14 | D-65232 Taunusstein | +49 6129 744 - 0 | +49 6129 744 - 120 | www.sgs-institut-freenius.de  
Member of the SGS Group

Alle Datenreihen werden auf Grundlage der anerkannten Allgemeinen Qualitätsstandards der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erstellt.  
Die Veröffentlichung und Bereitstellung dieser Prüfberichte und Zertifikate ist Freiseenius GmbH durch entsprechende Vereinbarung in schriftlicher Form seitens unserer verbundenen Unternehmen.  
Seitendruckerei: Dr. Thomas P. Bräutigam, Leine 105/106, Kahlthor-allee-10/106a, 30634 Roden, 49 36 3001244, Taunusstein, 493 2003 Amtmann/Walden



Scarica i Test Report completi dal nostro sito web: [www.lovelyloby.it/documenti](http://www.lovelyloby.it/documenti)

# PIERCING DISPLAY



## ATTESTATO DI CORAGGIO PER BAMBINI



Scarica l'Attestato dal nostro sito web: [www.lovelyloby.it/documenti](http://www.lovelyloby.it/documenti)



# Corso Foratura Lobo LOVLYLOBY ACADEMY

## Impara la teoria e la pratica per esercitare la foratura del lobo

Il corso è stato strutturato in 3 pratiche presentazioni tematiche, facilmente fruibili, e di una dimostrazione video.

Al momento dell'attivazione del nuovo Punto Vendita la Farmacia verrà contattata dall'azienda per l'attivazione del corso.

## Il corso si suddivide in 4 moduli:

- ◆ Dermatologia
- ◆ Igiene
- ◆ Prevenzione e Sicurezza
- ◆ Video Corso di Pratica

# Video Corso Completo di Foratura: TECNICHE E TUTORIAL


E' consigliata la visione di questo Corso a tutti, in quanto la tecnologia Pull&Click utilizzata dal nostro sistema LovlyLoby è differente rispetto a tutte le altre aziende presenti sul mercato.



Video Corso tenuto dalla nostra esperta Dottorssa Sara Ghigliazza, Farmacista.



Scansiona qui  
per il video

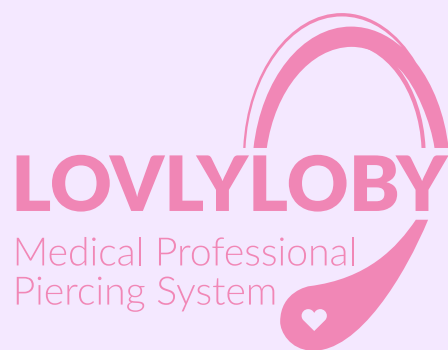

**AB-GLOBAL S.R.L.**

Viale Cembrano 4c/5 , 16148 Genova  
info@ab-global.it